

WasserLAB

Water Purification Systems

ULTRAMATIC GR
GAMA BASICA
AGUA TIPO I




Equipo GAMA BÁSICA de Purificación de Agua que proporciona Agua ultrapura Tipo I:

- ❖ Resistividad 18.2 MΩ.cm.
- ❖ TOC < 10 ppb.
- ❖ Bacterias < 1 ufc/ml.
- ❖ Partículas > 0,22 µm < 1.



Agua de Alimentación: Agua pre tratada Tipo II u Osmotizada < 20 µS/cm

Sencillez de manejo.

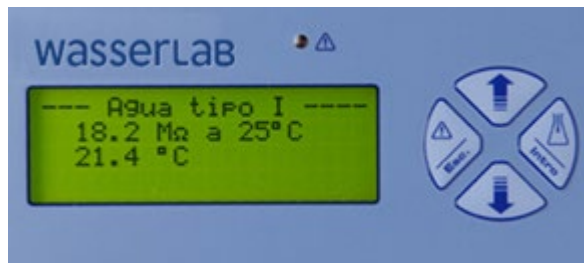

Pantalla digital de fácil manejo y lectura

Lectura constante de resistividad en $M\Omega \cdot cm$ ($\pm 0,1$) con compensación de temperatura a 25 °C.

Dispensación Manual por pulsación teclado.

Caudal de dispensación 1,1 l/min.

Incluye:

- ❖ Lámpara de foto oxidación para eliminación de materia orgánica.
- ❖ Filtro Final de partículas de 0,22 µm.
- ❖ Recirculación automática el agua.
- ❖ Aviso de sustitución del módulo de ultrapurificación.
- ❖ Calibración de fábrica.




Aplicaciones:

- ❖ Absorción atómica / ICP
- ❖ HPLC
- ❖ Cromatografía Iónica
- ❖ GC-MS

Esquema Hidráulico:

Ultramatic GR

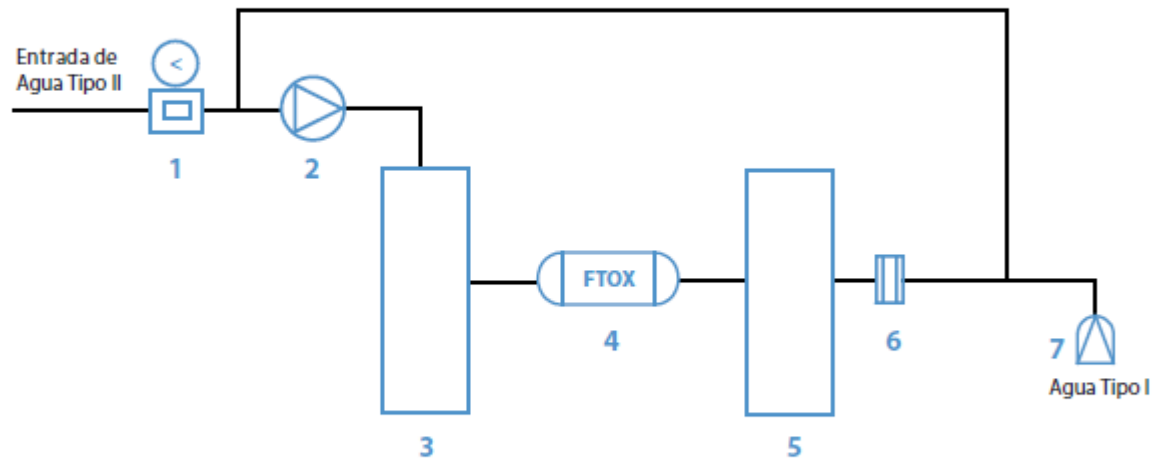

- 1 Regulador de presión. 2 Bomba. 3 Módulo de Purificación GR. 4 Lámpara de Fotooxidación. 5 Módulo de Purificación GR.
6 Sonda Resistividad/T°. 7 Filtro Final 0,22 µm.

Accesorio: Depósito de alimentación de 25 Litros.

En casos donde el usuario no disponga de equipo de Agua Tipo II.


Depósito de almacenamiento de agua destilada para alimentación de equipo.

El depósito alimenta al Ultramatic GR por gravedad



Recomendaciones:

- ❖ Cliente sensible al precio.
- ❖ Adecuado para bajos consumos de agua purificada.

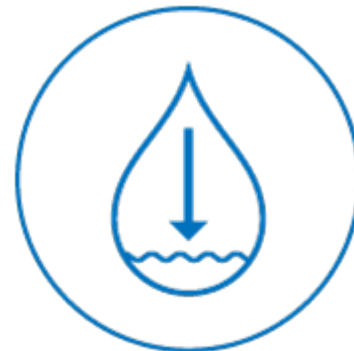



wasserLab



Equipamientos Analíticos S.A

DESDE 1989 | BRINDANDO SOLUCIONES